

Este folheto foi confeccionado para auxiliar no processo de lacração do frasco de diluente sublingual.

1



Serão utilizados os seguintes materiais:
- 1 frasco de vidro e 1 tampa plástica.
- 1 lacrador contendo 2 partes (base e corpo).

2



Vista do frasco (sem o batoque), da tampa e do lacrador aberto, com a base separada do corpo.

3



Passo 1: Colocar o frasco de vidro aberto, sem o batoque, dentro da base do lacrador.

4



Passo 2: Colocar a tampa plástica no frasco de vidro, ainda com o frasco dentro da base do lacrador.

5



Passo 3: Segurar a tampa plástica para colocar o corpo do lacrador por cima do frasco de vidro

6




Passo 4: Abaixar o corpo do lacrador até a base.

7



Passo 5: Verificar se o conjunto lacrador está bem fechado.

8

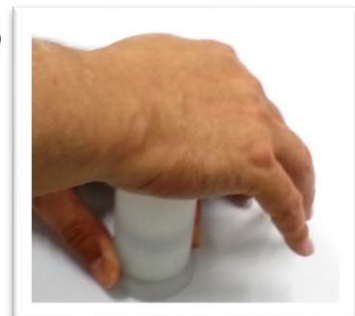

Passo 6: Apoiar a mão por cima do conjunto lacrador.

9



Passo 7: Apertar o lacrador com uma batida de mão por cima da base.

10



Passo 8: Abrir o lacrador, separando o corpo da base.

11



Passo 9: Retirar o frasco lacrado de dentro do dispositivo lacrador.

12



O frasco está lacrado e pronto para uso.